



Guía de inicio rápido

Búsquedas rápidas y avanzadas

Aprenda cómo:

1. Realizar una Búsqueda rápida
2. Realizar una Búsqueda avanzada

Búsqueda rápida



Select Language English

Barry Cato Last login on 06/29/2015

HOME SAMPLES EQUIPMENT LABELS REPORTS PREFERENCES ADMIN

Quick Search

Need Help ?



Messages


Welcome Castrol Users to Labcheck 2.0!

Visit the [Labcheck Resource Page](#) to view training guides and videos on using Labcheck.

Alerts

SAMPLE ACTIONS
Unviewed Critical (0)
Unviewed Abnormal (0)

EQUIPMENT ACTIONS
[Units overdue for sampling \(1685\)](#)
[Units due for sampling \(5\)](#)

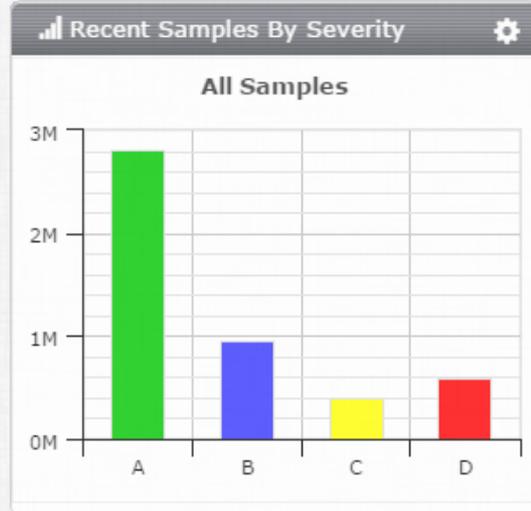


News

- Sample Submitted**
Frank Gilboy s
0012 BEARIN
Aberdeen.MD
Advanced Was
USE-IL ACCT*
- Sample Overdue**
Unit ENGINE :
BOWES HAUL
Management]
overdue for sa
- Sample Submitted**
Frank Gilboy s
1235 Caterpill
ENGINE at sit
[Abel Construc
Inc]

Track Samples

Track Sample

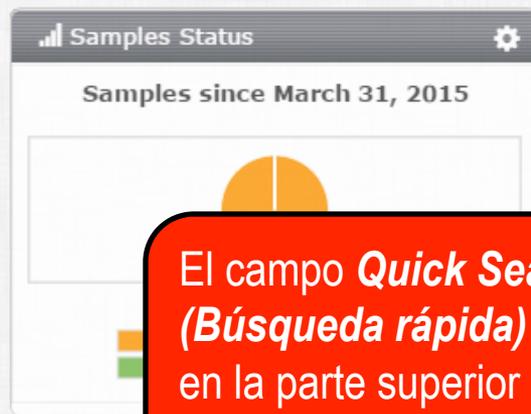

Critical Condition

Unit	Component	Condition
------	-----------	-----------

El campo **Quick Search** (**Búsqueda rápida**) se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla en todas las pestañas.

Búsqueda rápida



Select Language English

Frank Gilboy Last login on 06/29/2015

HOME SAMPLES EQUIPMENT LABELS REPORTS PREFERENCES ADMIN

1 Need Help ?

Messages

Welcome Castrol Users to Labcheck 2.0!

Visit the [Labcheck Resource Page](#) to view training guides and videos on using Labcheck.


Alerts

SAMPLE ACTIONS
Unviewed Critical (0)
Unviewed Abnormal (0)

EQUIPMENT ACTIONS
Units overdue for sampling (1685)
Units due for sampling (5)

Track Samples

[Track Sample](#)

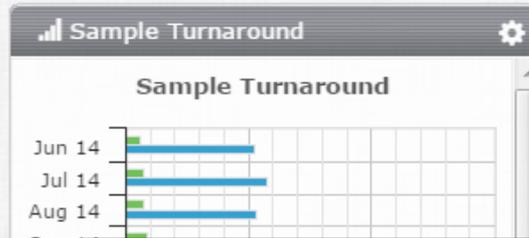

Critical Condition

Unit	Component	Condition

Recent Samples

Sample ID	Equipment
1056	International 7400
1091	Mack MR688S
111	Ford F350
114566	Deere 700J
1202146	Mack RD690DS
121002	Bomag 1720
1301223	Mack CH613
13234	Mack CH613
15175	Deere 450J
16	International 9100
163	Freightliner FL SERIES
165106	JCB 550
177668	Ingersoll Rand RT706

Samples since March 31, 2015

La **Quick Search (Búsqueda rápida)** tiene una función de “sugerencias”. Mientras usted escribe, verá resultados en base a los caracteres que usted ingresa. Escriba las primeras letras de un componente, ID de unidad, lugar de trabajo, etc., y haga clic en el resultado que aparece para ir al área específica en la jerarquía de Equipos.

Búsqueda avanzada



HOME SAMPLES EQUIPMENT LABELS REPORTS PREFERENCES AD

Inbox Search

Sample Search

Quick filter here



Export XLS



Print Report

+ Advanced Search

Date Range

All Samples

Only Samples in Reviewed Date Range

Earliest:

MMM dd, yyyy

Latest:

MMM dd, yyyy

Severity

A B C D

Customer

Name

Worksite

State

Zip Code

City

Unit

ID

Worksite

Make

Unit Model

Unit Serial No.

Component

Component Type

Manufacturer

Model

Reference No.

Sample

Condition

Oil Manufacturer

Oil Brand

Oil Grade

Submit Search Criteria

Reset Form

Haga clic en la pestaña Muestras para utilizar la función **Advanced Search (Búsqueda avanzada)**. En la pestaña Búsqueda, expanda el enlace **Advanced Search (Búsqueda avanzada)**. Aquí puede especificar un rango de fechas e información específica de clientes, unidades, componentes y/o muestras. Cuando haya ingresado los parámetros, haga clic en el botón **Submit Search Criteria (Enviar criterios de búsqueda)** para realizar la búsqueda.

Búsqueda avanzada



Select Language English

Frank Gilboy Last login on 06/29/2015

HOME SAMPLES EQUIPMENT LABELS REPORTS PREFERENCES ADMIN

Quick Search

Need Help?

Inbox Search

Sample Search

Quick filter here



Export XLS

Print Report(s)

Show/hide columns

Filters

[+ Advanced Search](#)

<input type="checkbox"/>	Severity	Unit ID	Sampled Date	Received Date	Unit Make	Unit Model	Component
<input checked="" type="checkbox"/>	D	101867	Dec 12, 2014	Dec 16, 2014	Mack	LE613	FRONT ENGINE
Increased soot and elevated viscosity can cause wear, poor fuel economy and reduced oil flow. Check operating conditions, emission controls, air induction system and fuel su of the compartment will help confirm results. When C or D codes are present, the following is recommended, if not done at time of sampling. Change oil, and filters (if applicable							
<input type="checkbox"/>	D	865	Dec 12, 2014	Dec 16, 2014	Peterbilt	320	ENGINE
Elevated level of Silicon could indicate the presence of dirt, sealants or any Silicon containing material.--RECOMMENDATIONS --Sample results indicate presence of contamin monitor unit and resample at one-half the normal service interval.							
<input checked="" type="checkbox"/>	C	307274		Dec 15, 2014	International	-4900	ENGINE
Sodium level is elevated.Wet chemical Glycol Test is Negative. --RECOMMENDATIONS -- Refer to the Labcheck trend graphing options to assist monitoring of unit/c ompartme							
<input type="checkbox"/>	C	206744	Nov 06, 2014	Dec 15, 2014	Mack	MR688S	ENGINE
Elevated soot can cause deposits, sludge, shorte is recommended, if not done at time of sampling							
<input type="checkbox"/>	D	265191					
Copper and Aluminum levels are elevated. Poss recommended, if not done at time of sampling.							
<input type="checkbox"/>	D	210707					
Copper level elevated. Possible sources could b							

Para **Save (Guardar)** o **Print (Imprimir)** informes que haya buscado, seleccione las casillas de verificación al lado de ellos y haga clic en el botón **Print Report(s) (Imprimir Informe(s))**. Se abrirá una nueva ventana con la versión en PDF de su(s) informe(s). Para visualizar sus muestras en formato XLS, haga clic en el botón Exportar XLS.

Búsqueda avanzada



Select Language English

Frank Gilboy Last login on 06/29/2015

- HOME
- SAMPLES
- EQUIPMENT
- LABELS
- REPORTS
- PREFERENCES
- ADMIN

Quick Search

Need Help ?

Inbox Search

Sample Search

Quick filter here

Export XLS

Print Report(s)

Show/hide columns

Filters



<input type="checkbox"/>	Severity	Unit ID	Sampled Date	Received Date	Unit Make	Unit Model	Component
<input checked="" type="checkbox"/>	D	101867	Dec 12, 2014	Dec 16, 2014	Mack	LE613	FRONT ENGINE
Increased soot and elevated viscosity can cause wear, poor fuel economy and reduced oil flow. Check operating conditions, emission controls, air induction system and fuel su of the compartment will help confirm results. When C or D codes are present, the following is recommended, if not done at time of sampling. Change oil, and filters (if applicable							
<input type="checkbox"/>	D	865	Dec 12, 2014	Dec 16, 2014	Peterbilt	320	ENGINE
Elevated level of Silicon could indicate the presence of dirt, sealants or any Silicon containing material.--RECOMMENDATIONS --Sample results indicate presence of contamin monitor unit and resample at one-half the normal service interval.							
<input checked="" type="checkbox"/>	C	307274		Dec 15, 2014	International	-4900	ENGINE
Sodium level is elevated.Wet chemical Glycol Test is Negative. --RECOMMENDATIONS -- Refer to the Labcheck trend graphing options to assist monitoring of unit/c ompartme							
<input type="checkbox"/>	C	206744	Nov 06, 2014	Dec 15, 2014	Mack	MR688S	ENGINE
Elevated soot can cause deposits, sludge, shortened oil filter life and poor engine performance. Check operating conditions and fuel supply.Increased nitration can cause the fo is recommended, if not done at time of sampling. Change oil, and filters (if applicable), to remove contamination. If applicable, perform off-line filtration if available. Closely mon							
<input type="checkbox"/>	D	265191	Dec 09, 2014	Dec 15, 2014	Mack	MR688S	ENGINE
Copper and Aluminum levels are elevated. Possible sources of wear (if applicable recommended, if not done at time of sampling. Change oil, and filters (if applicable							
<input type="checkbox"/>	D	210707	Nov 29, 2014	Dec 15, 2014	Mack	MR688S	ENGINE
Copper level elevated. Possible sources could be passivation, wrist pins, bushing contamination. If applicable, perform off-line filtration if available. Closely mon							

Puede guardar esta búsqueda para utilizarla de nuevo en el futuro creando un Filtro. Para instrucciones más detalladas, vea la Guía de inicio rápido Avanzada de Filtros.



SERVICIO DE SOPORTE DE LABCHECK:

Teléfono: **1.866.522.2432**

Correo electrónico: **LabcheckSupport@AnalystsInc.com**

www.LabcheckResources.com